

Highlights des Z5 Tissue Level Implants

Weltweit erste 100% keramische, zweiteilige, geschraubte Implantat-Abutment-Verbindung

Z5-TL 40-10


> Implantat 4 mm × 10 mm

100% Keramik

- 100% keramisches, geschraubtes, zweiteiliges Tissue Level Implantat
- Chirurgisches Vorgehen analog zur zweiteiligen Titan-Implantologie
- Geschlossene Einheilung, Augmentation und simultaner Sinus-Lift in geeigneten Fällen möglich

Erfahrung aus über 80.000 gesetzten Implantaten

- Bewährtes enossales Design basierend auf den Tissue-Level Vorgängern sichert übertragbare Ergebnisse
- Das selbstschneidende Gewinde mit Knochenspanreservoir reduziert das Eindrehmoment
- Hervorragende Osseointegration durch bewährte, patentierte firmeneigene SLM® Laseroberflächentechnologie und schonende Plasmasterilisation

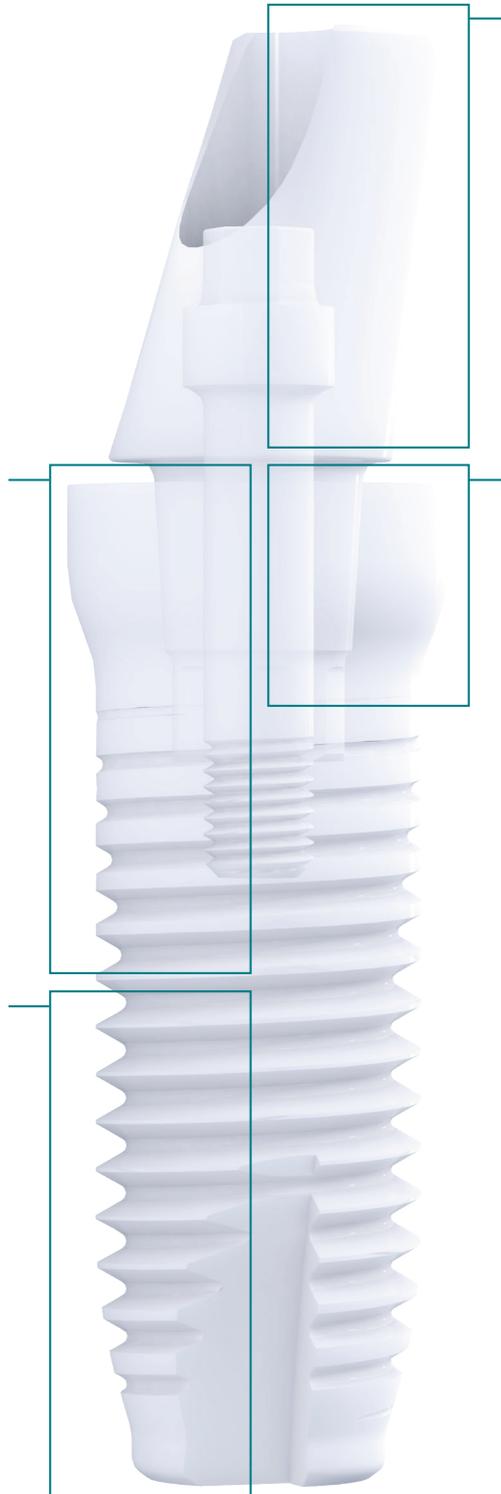

Ästhetik für die professionelle Versorgung

- Breites Sortiment an geraden und gewinkelten Abutments für optimale ästhetische Resultate und flexible Funktionalität
- Vielfältige Möglichkeiten zur Ausgestaltung des Austrittsprofils

Einzigartige starke Verbindung

- Die konische Schraubverbindung mit Innengewinde zur mikrosplattfreien Verbindung und Verhinderung eines Pumpeffekts.
- **NEU:** keramische Abutment-Schraube zur 100% keramischen Versorgung
- Optional steht eine Titan-schraube zur Verfügung



Z-SYSTEMS
ceramic implants