

# Points forts de l'implant bone-level Z5-BL

Le 1<sup>er</sup> implant au monde avec une connexion implant-pilier vissée en 2 parties, 100 % céramique

## Z5-BL 40-10


> Implant 4 mm × 10 mm

### 100% céramique

- Implant 100 % céramique, vissé, en deux pièces au niveau de l'os.
- Procédure chirurgicale similaire à l'implantologie en titane en deux parties
- L'augmentation de la cicatrisation fermée et le soulèvement simultané des sinus sont possibles dans les cas appropriés.

### Expérience de plus de 100 000 implants posés

- La conception endo-osseuse établie, basée sur des prédécesseurs au niveau des tissus, garantit des résultats reproductibles.
- Le filetage autotaraudeur avec réservoir de copeaux osseux réduit le couple d'insertion.
- Excellente ostéointégration grâce à la technologie de surface laser SLM® brevetée et éprouvée de Z-SYSTEMS et à la stérilisation douce au plasma.

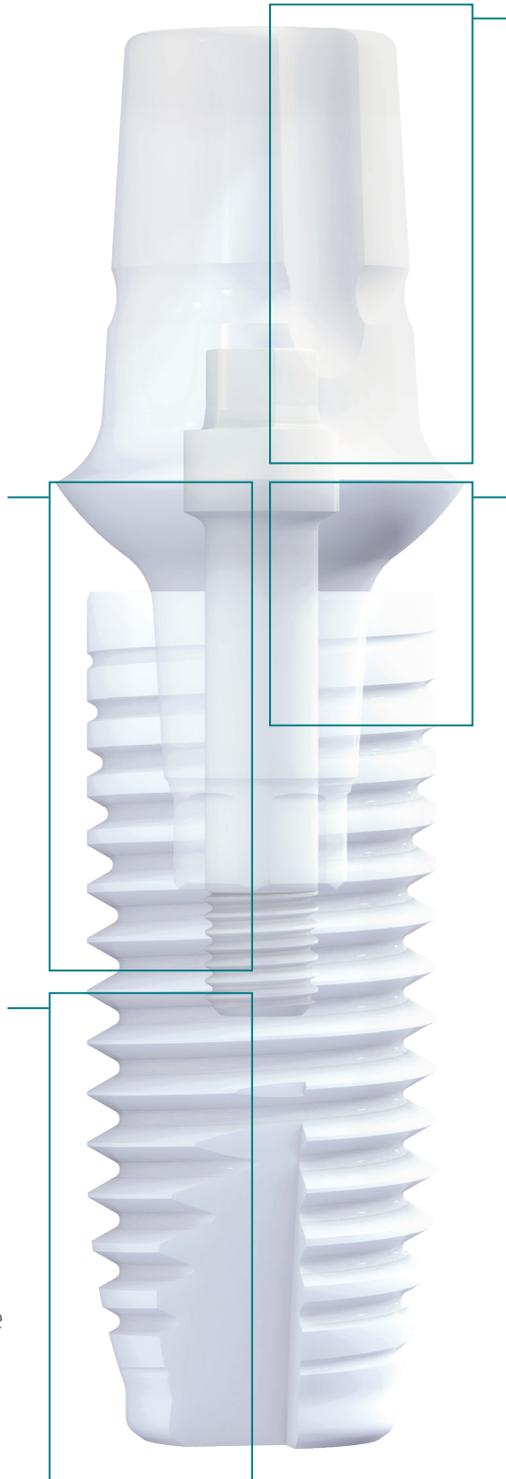

### Esthétique pour les soins professionnels

- Large gamme de piliers droits et angulaires pour des résultats esthétiques optimaux et une fonctionnalité flexible.
- Un large choix d'options pour la conception du profil d'émergence.

### Une connexion unique et forte:

- La connexion conique avec filetage interne permet une connexion sans micro-espace et empêche un effet de pompe.
- **NOUVEAU** : vis de pilier en céramique pour une restauration 100 % céramique
- Une vis en titane est également disponible en option.
- Changement de plate-forme pour une coiffe muqueuse plus stable, plus large et pour une charge réduite de l'os crestal