

Points forts de l'implant tissue-level Z5-TL

Le 1^{er} implant au monde avec une connexion implant-pilier vissée en 2 parties, 100 % céramique

Z5-TL 40-10

> Implant 4 mm × 10 mm

100% céramique

- Implant 100 % céramique, vissé, en deux pièces au niveau des tissus mous.
- Procédure chirurgicale similaire à l'implantologie en titane en deux parties
- Gestion optimisée des tissus mous grâce à la conception brevetée de l'épaulement.

Expérience de plus de 100 000 implants posés


- La conception endo-osseuse établie, basée sur des prédécesseurs au niveau des tissus, garantit des résultats reproductibles.
- Le filetage autotaraudeur avec réservoir de copeaux osseux réduit le couple d'insertion.
- Excellente ostéointégration grâce à la technologie de surface laser SLM® brevetée et éprouvée de Z-SYSTEMS et à la stérilisation douce au plasma.

Esthétique pour les soins professionnels

- Large gamme de piliers droits et angulés pour des résultats esthétiques optimaux et une fonctionnalité flexible.
- Un large choix d'options pour la conception du profil d'émergence.

Une connexion unique et forte

- Le vissage conique avec filetage intérieur permet une connexion sans micro-gap et évite l'effet de pompe.
- **NOUVEAU** : vis de pilier en céramique pour une restauration 100 % céramique
- Une vis en titane est également disponible en option.

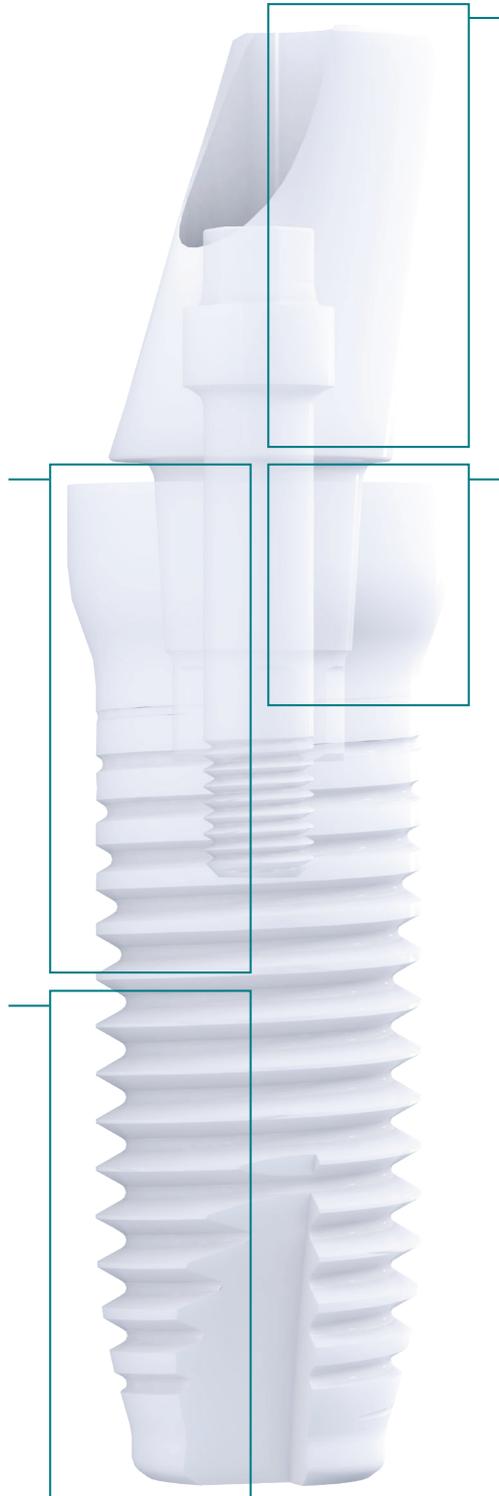

Siège

Z-Systems AG | Werkhofstrasse 5 | CH-4702 Oensingen | Tél. +41 62 388 69 69 | support@zsystems.com

Distributeur France/Belgique/Luxembourg

Thommen Medical France | Le PARK, Bâtiment B | 1 Rue Charles Cordier | 77164 Ferrières en Brie
Tél. +33 1 83 64 06 35 | commande@thommenmedical.fr